


**TOSKANIMED**  
PASSION FOR SKIN®



**neopen**®

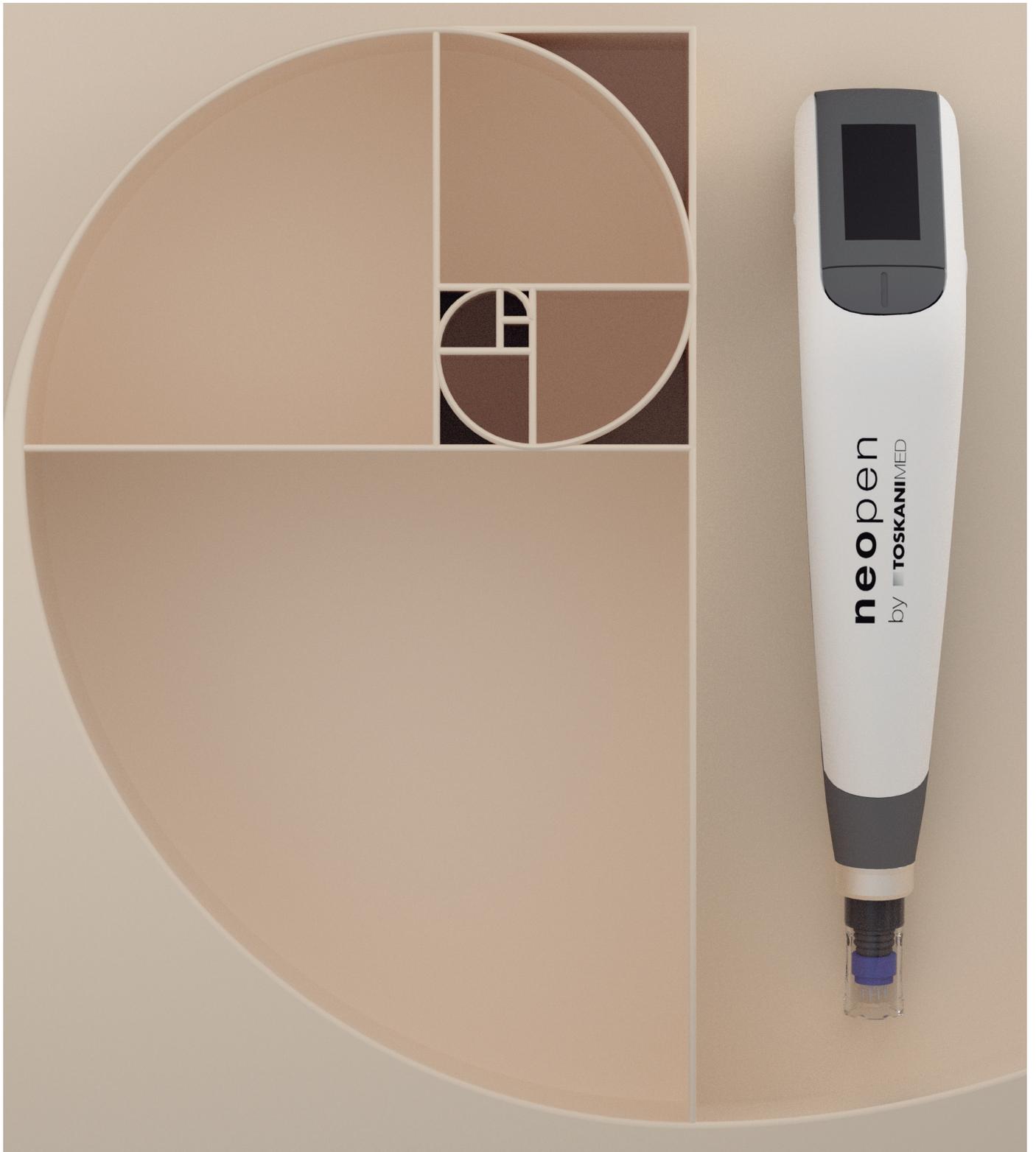

# Chi siamo

TOSKANIMED è il brand che identifica la divisione del laboratorio farmaceutico di ricerca e sviluppo TOSKANI dedicata alla medicina estetica con oltre 36 anni di esperienza nel settore medico estetico ed una presenza in oltre 70 paesi nei cinque continenti. Il brand si occupa principalmente della produzione di dispositivi medici iniettabili, peeling chimici e cosmeceutica all'avanguardia per soddisfare le esigenze più raffinate del paziente.

“

**Essere player di riferimento del mercato con molecole innovative come Peptidi biomimetici, Liposomi e Acido ialuronico di grado medico ed alta purezza.**

”

## MISSION

TOSKANIMED concentra le sue attività nei settori in cui può fare una reale differenza nel migliorare la qualità della vita dei pazienti, offrendo soluzioni pronte all'uso a disposizione degli operatori sanitari per eseguire i trattamenti più sicuri ed efficaci. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di creare prodotti nella loro forma migliore, esclusivamente nell'ottica di andare incontro alle necessità e alle aspettative dei pazienti.

## COSA CI GUIDA

**Qualità farmaceutica** nei principi attivi impiegati all'interno delle nostre formulazioni ed in tutti i processi aziendali per la loro produzione.

**Innovazione** in ogni formula studiata e sviluppata per ottenere soluzioni complete basate su molecole di tecnologia avanzata (Peptidi biomimetici, Liposomi e Acido ialuronico da 3000kDa).

**Sicurezza.** Tutti i nostri prodotti sono soggetti ai controlli più accurati, rendendo la loro applicazione efficace per i professionisti e sicura per il paziente.


**Performance.** I risultati di anni di studi clinici supportano l'efficacia dei nostri prodotti.

**Integrazione verticale.** Tutti i nostri prodotti e principi attivi sono fatti internamente e in tutte le fasi della fabbricazione vengono controllati con processi integrati verticalmente. Questo assicura la migliore qualità del prodotto finito ed un controllo diretto su tutta la lavorazione, una maggiore velocità e flessibilità, nonché la riduzione dei rischi lungo la catena di approvvigionamento


**Sostenibilità** e attenzione per l'ambiente. TOSKANI crede fermamente nel benessere degli individui e il perseguimento di questo obiettivo è una parte integrante della sua cultura e obiettivo fondamentale della compagnia. Ecco perché come azienda siamo sempre impegnati nella costante e progressiva riduzione del suo impatto sull'ambiente lavorando per migliorare i suoi risultati in termini di consumo energetico e di emissioni di CO2.

# La tecnologia del **Microneedling**

Il **microneedling** è una tecnica di ringiovanimento non invasiva che sfrutta l'azione di micro aghi chirurgici, per aprire i canali nello strato dermico, portando all'elevata produzione di **Collagene ed Elastina** e aiutando a **introdurre i principi attivi sterili**.

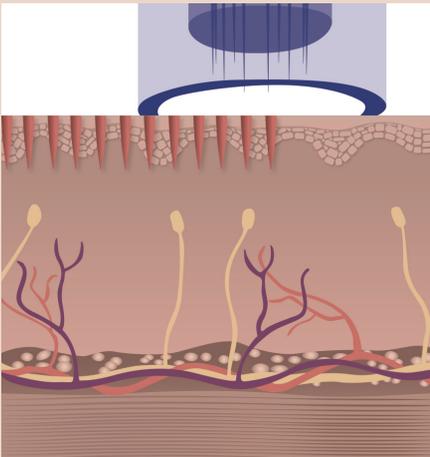

Inoltre, **favorisce la formazione di nuovo collagene, la neovascolarizzazione e il rilascio di fattori di crescita** benefici per la salute della pelle e del cuoio capelluto.<sup>1 2 3</sup>

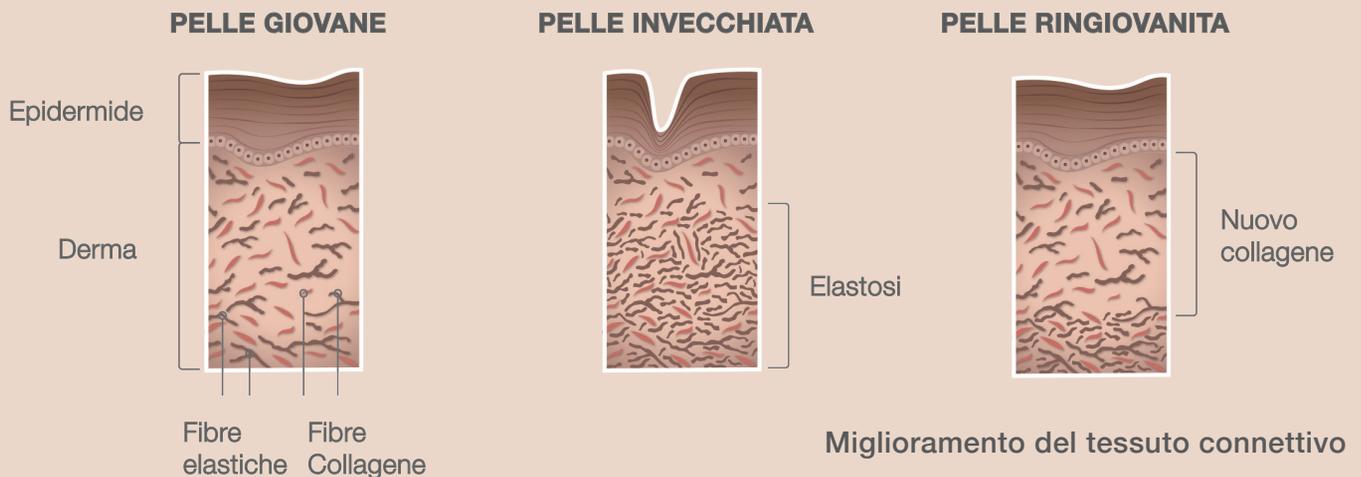


# Microneedling by TOSKANIMED®

**neopen®** è il nuovo dispositivo Microneedling di TOSKANIMED, l'ultima rivoluzione nel mondo dei trattamenti estetici e delle apparecchiature medico estetiche.

**neopen®** insieme alla gamma completa di cocktail per mesoterapia transdermica TOSKANI Advanced, affronta tutti i problemi relativi a pelle secca, pigmentazione, perdita di capelli, smagliature, cicatrici, rosacea, pori dilatati e perdita di tonicità viso/corpo

La sua tecnologia avanzata, con un'innovativa testina a 16 aghi, apre i canali della pelle in modo rapido ed efficace.

Vanta inoltre un sistema unico per garantire che l'ago scorra verticalmente nella pelle mantenendo l'integrità del tessuto.

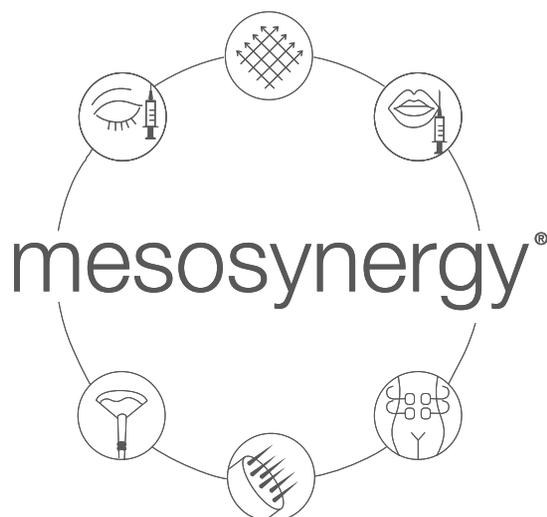

**Mesosynergy®** è un concetto che lega il **neopen®** e le sue caratteristiche ad altre tecniche di medicina estetica.

# I 9 vantaggi di **neopen**<sup>®</sup>

## **DESIGN RIVOLUZIONARIO CON UNA TESTINA A 16 AGHI**

Il neopen<sup>®</sup> crea migliaia di canali per il ringiovanimento e aumenta i risultati. Scorre sulla pelle del paziente per un comfort totale.

## **DOPPIA RICARICA**

Convenienza e capacità con diverse opzioni di ricarica: a batteria o da rete.

## **TESTINA DI AGHI RFID INTEGRATA**

Calibrazione automatica per una penetrazione dell'ago precisa, affidabile e senza trascinamento.

## **GESTIONE ANTI-CONTAMINAZIONE**

Garantisce sicurezza e protezione senza pari. Nessun reflusso di liquidi, nessuna contaminazione incrociata e nessuna trazione della pelle.

## **VELOCITÀ**

Fino al 104% più veloce degli altri dispositivi di microneedling. È in grado di aprire 1.920 canali al minuto.

## **SCHERMO DIGITALE ONE-TOUCH CON IMPOSTAZIONI INTEGRATE**

Gestisce le impostazioni di profondità, velocità e trattamento con il semplice tocco di un pulsante. Controllo assoluto della procedura sullo schermo.

## **DESIGN ERGONOMICO**

Meccanismo di presa facilitata per trattamenti senza sforzo, scorrevoli e confortevoli per viso, corpo e cuoio capelluto.

## **CONNESSIONE BLUETOOTH**

Così da poter restare aggiornati su tutte le novità sui prodotti.

## **ADATTABILE A QUALSIASI PARTE DEL CORPO**

Nuova impostazione anche per il trattamento delle cicatrici. Tratta le cicatrici e ottieni grandi risultati con questa nuova ed esclusiva impostazione.





## neopen® caratteristiche tecniche

- Velocità: è in grado di aprire 1,920 canali al minuto. Fino al 104% più veloce di altri dispositivi per il microneedling.
- Profondità fino a 2.5 mm.
- Standards ISO13485 e marchio CE del dispositivo e degli aghi come medical device.
- Nessuna contaminazione incrociata grazie al sistema di gestione della contaminazione della testina e alla copertura sterile monouso.
- Doppia modalità di funzionamento (tramite cavo e batteria).
- Schermo digitale one-touch.
- Design ergonomico.

## Testa dell'ago caratteristiche tecniche

- Materiale ago: acciaio inossidabile di tipo chirurgico.
- Standards ISO13485 e marchio CE del dispositivo e degli aghi come medical device.
- Design della testina a 16-aggi.
- Precisione - l'ago entra nella pelle perpendicolarmente.
- Nessun graffio o trascinamento sulla pelle, prevenendo lesioni e ferite.

# COCKTAILS ADVANCED

Combinazioni biorivitalizzanti uniche di acido ialuronico, peptidi biomimetici, complessi vitaminici, coenzimi e minerali progettati per produrre risultati efficaci e duraturi.



## 1. ECPR (Eye Complex Poli Revitalising)

5 ml / 0.17 fl oz

Correzione complessiva della zona periorbitale e di problematiche come borse, occhiaie e rughe di espressione.

**Contiene:** Vitamina C, 3 Peptidi funzionali, 2 Estratti Vegetali, Silicio Organico, Acido ialuronico, 3 Flavonoidi, Cumarina.



## 2. RCPR (Refine Complex Poli Revitalising)

5 ml / 0.17 fl oz

Ringiovanisce, idrata e ammorbidisce la pelle con rughe sottili, segni post-acneici, lieve rilassamento, mancanza di luminosità e idratazione.

**Contiene:** 14 Vitamine, 24 Aminoacidi, 5 Fattori di crescita, Acido ialuronico, 5 Nucleotidi, 1 Agente riducente, 5 Coenzimi, 3 Minerali, 3 Peptidi funzionali.



## 3. WCPR (Brightening Complex Poli Revitalising)

5 ml / 0.17 fl oz

Riduce le dimensioni e l'intensità delle iperpigmentazioni uniformando il tono della pelle.

**Contiene:** 2 Vitamine, 2 Estratti Vegetali, 2 Fattori di crescita, 1 Agente riducente,  $\alpha$ -Arbutina, 5 Peptidi funzionali.



**4. NCPR**  
**(Nutritive Complex Poli Revitalising)**

5 ml / 0.17 fl oz

Nutre e idrata la pelle in profondità, migliorandone l'elasticità.

**Contiene:** 12 Vitamine, 23 Aminoacidi, Acido ialuronico, 3 Nucleotidi, 2 Agenti riducenti, 5 Coenzimi, 4 Minerali.



**5. HCPR**  
**(Hair Complex Poli Revitalising)**

5 ml / 0.17 fl oz

Rafforza, nutre e ripristina la densità dei capelli.

**Contiene:** 14 Vitamine, 23 Aminoacidi, 4 Fattori di crescita, 5 Nucleotidi, 1 Agente riducente, 4 Coenzimi, 3 Minerali, 3 Peptidi funzionali.



**6. HAIR COCKTAIL PLUS**

10 ml / 0.34 fl oz

Arresta la caduta dei capelli e migliora l'attività del follicolo.

**Contiene:** Sabal Serrulata, Troxerutina, Biotina, Piridoxina, Pantenolo, Taurina, Ferro.

---

# Risultati

## ANTIAGEING

---

Età: 37



Prima

Età: 49



Dopo

5 SEDUTE CON NEOPEN + NCPR

## ILLUMINANTE

---

Età: 36



Prima

Dopo



Prima

Dopo

4 SEDUTE CON NEOPEN + WCPR

---

## RIGENERANTE

---

Età: 36



Inizio



Dopo la preparazione con TCA +1 seduta




Dopo 2 sedute MESO + neopen®

6 SEDUTE CON NEOPEN + RCPR + NCPR

## HAIR LOSS

---

Età: 47

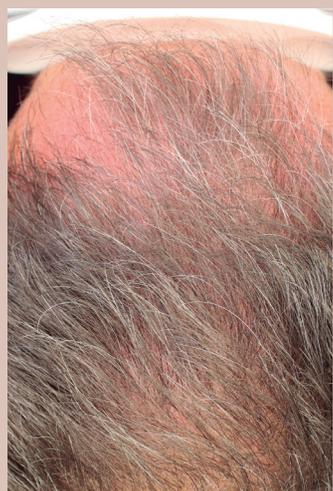

Prima



Dopo

Età: 57



Prima



Dopo

10 SEDUTE CON NEOPEN + HAIR COCKTAIL PLUS + HCPR

# CURA DERMOCOSMETICA POST TRATTAMENTO

Cosmesi medica che aiuta il recupero fisiologico della pelle dopo gli interventi medico estetici



## AFTER Cream

Crema ad azione locale con cannabidiolo (CBD), Vitamina K e Arnica montana che aiuta a ridurre lividi e arrossamenti post intervento medico estetico.



+ Arnica + Vit K

50 ml / 1.69 fl oz.


# SUN Protection Cream

SPF+50 crema solare intensiva e idratante non grassa con Urea, estratto di Mimosa, Allantoina e Vitamina E. Protegge dai raggi solari e svolge un'azione rigenerante e idratante.

**50 ml / 1.69 fl oz.**



# Tecnica di applicazione microneedling:

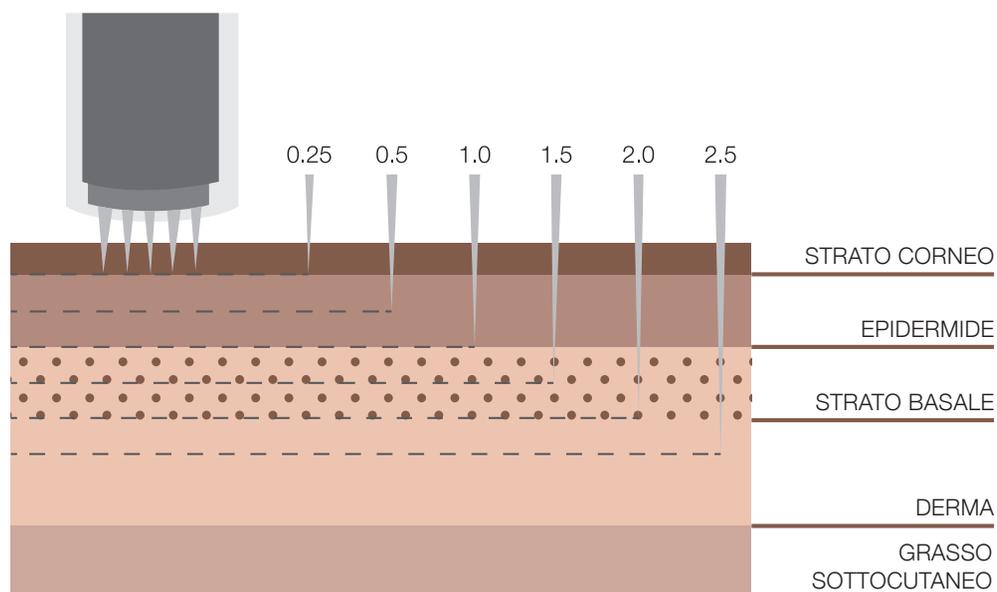

## Tecnica:



INDICATION	VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO (1-4)*	PROFONDITÀ MASSIMA CONSIGLIATA**
Anti-ageing	3	1 mm
Zona occhi	1	0,25 mm
Depigmentante	1	0,5 mm
Rigenerante	4	2,0 mm
Smagliature	4	2,5 mm
Capillari	3	1,0 mm

*\*\*Regolare in base all'area trattata e alla sensibilità del paziente*

Velocità 1	Velocità 2	Velocità 3	Velocità 4
80htz-80 giri al secondo	90htz-90 giri al secondo	105htz-105 giri al secondo	120htz-120 giri al secondo
			

\*Per pelli sensibili, provare o iniziare alla velocità 2 o 3 prima di passare alla velocità 3 o 4.



# TOSKANI MED

PASSION FOR SKIN®

neopen  
by TOSKANI MED

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA



**ALQUIMIA**

alquimiaestetica.it

Via Armando Vona (zona ASI) snc  
località Le Lame - 03100 Frosinone  
tel. 0775.290668



MD 724671



1 Uno studio randomizzato controllato, in cieco con un singolo osservatore per determinare l'efficacia del minoxidil topico più microneedling rispetto al solo minoxidil topico nel trattamento dell'alopecia androgenetica. Muriki K Kumar, Arun C Inamadar, Aparna Palit.

2 La stimolazione ripetuta con microaghi induce una maggiore crescita dei capelli in un modello murino Yoon Seob Kim, Kwan Ho Jeong, Jung Eun Kim, Young Jun Woo, Beom Joon Kim, Hoon Kang- Departamento de Dermatología, Hospital St. Paul, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Corea, Seoul, Corea.

3 Microneedling per il trattamento della caduta dei capelli R M Fertig, A C Gamret, J Cervantes, A Tosti.

TKN-67-3061-2110