

FILL & CARE®



Chi siamo

TOSKANIMED è il brand che identifica la divisione del laboratorio farmaceutico di ricerca e sviluppo TOSKANI dedicata alla medicina estetica con oltre 36 anni di esperienza nel settore medico estetico ed una presenza in oltre 70 paesi nei cinque continenti. Il brand si occupa principalmente della produzione di dispositivi medici iniettabili, peeling chimici e cosmeceutica all'avanguardia per soddisfare le esigenze più raffinate del paziente.

“

Essere player di riferimento del mercato con molecole innovative come Peptidi biomimetici, Liposomi e Acido ialuronico di grado medico ed alta purezza.

”

MISSION

TOSKANIMED concentra le sue attività nei settori in cui può fare una reale differenza nel migliorare la qualità della vita dei pazienti, offrendo soluzioni pronte all'uso a disposizione degli operatori sanitari per eseguire i trattamenti più sicuri ed efficaci. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di creare prodotti nella loro forma migliore, esclusivamente nell'ottica di andare incontro alle necessità e alle aspettative dei pazienti.

COSA CI GUIDA

Qualità farmaceutica nei principi attivi impiegati all'interno delle nostre formulazioni ed in tutti i processi aziendali per la loro produzione.

Innovazione in ogni formula studiata e sviluppata per ottenere soluzioni complete basate su molecole di tecnologia avanzata (Peptidi biomimetici, Liposomi e Acido ialuronico da 3000 kDa).

Sicurezza. Tutti i nostri prodotti sono soggetti ai controlli più accurati, rendendo la loro applicazione efficace per il professionista e sicura per il paziente.

Performance. I risultati di anni di studi clinici supportano l'efficacia dei nostri prodotti.


Integrazione verticale. Tutti i nostri prodotti e principi attivi sono fatti internamente e in tutte le fasi della fabbricazione vengono controllati con processi integrati verticalmente. Questo assicura la migliore qualità del prodotto finito ed un controllo diretto su tutta la lavorazione, una maggiore velocità e flessibilità, nonché la riduzione dei rischi lungo la catena di approvvigionamento

Sostenibilità e attenzione per l'ambiente. TOSKANI crede fermamente nel benessere degli individui e il perseguimento di questo obiettivo è una parte integrante della sua cultura e obiettivo fondamentale della compagnia. Ecco perchè come azienda siamo sempre impegnati nella costante e progressiva riduzione del suo impatto sull'ambiente lavorando per migliorare i suoi risultati in termini di consumo energetico e di emissioni di CO2.

SKIN Architect Fillers

Dopo più di cinque anni di ricerca e sviluppo, **TOSKANIMED** ha creato una gamma completa di Filler dermici a base di acido ialuronico ad altissimo peso molecolare.

L'obiettivo primario, cardine della nostra filosofia aziendale, è sempre quello di offrire le migliori soluzioni per la cura della pelle, non solo dal punto di vista estetico, ma anche con una particolare attenzione verso la salute e la bellezza autentica.

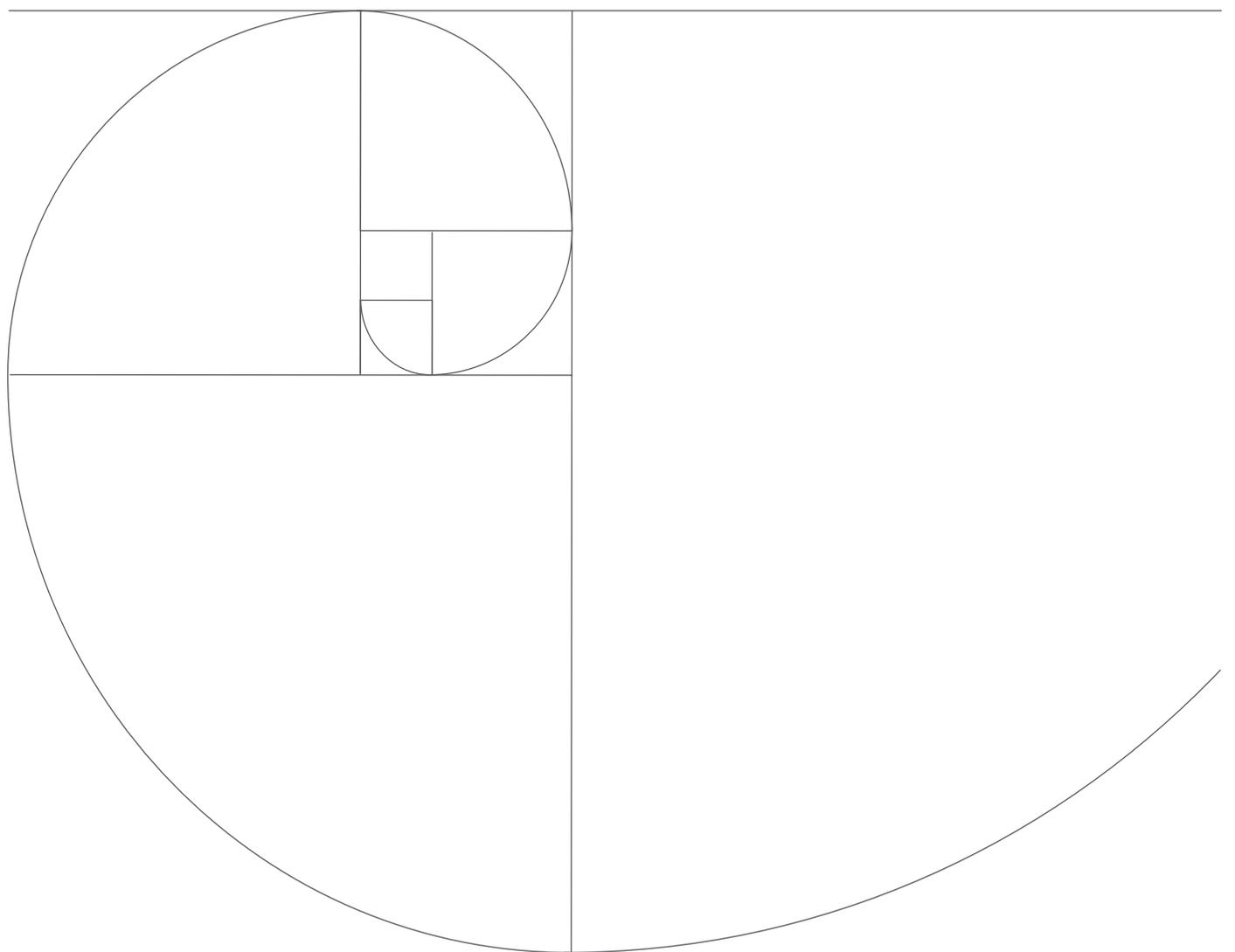


Siamo impegnati nella ricerca della naturalezza, delle forme ben bilanciate e linee armoniose, una ricerca che nel corso degli anni ci ha portato a sviluppare con cura, nei nostri laboratori di Barcellona, una nuova gamma di dispositivi medici iniettabili a base di acido ialuronico reticolato di origine biotecnologica. Questa gamma innovativa e all'avanguardia si adatta perfettamente alla nostra Brand Vision che spinge più verso un approccio conservativo ed integrale che interventista, traendo ispirazione dal nostro concept **Mesosynergy®** intento ad armonizzare ed uniformare più trattamenti, combinando diverse tecniche medico estetiche per ottenere i migliori risultati su qualsiasi tipo di pelle

“

La sinergia riguarda la passione, l'energia, l'impegno, l'eccitazione nel creare qualcosa di nuovo di gran lunga migliore rispetto a quello precedente.

”

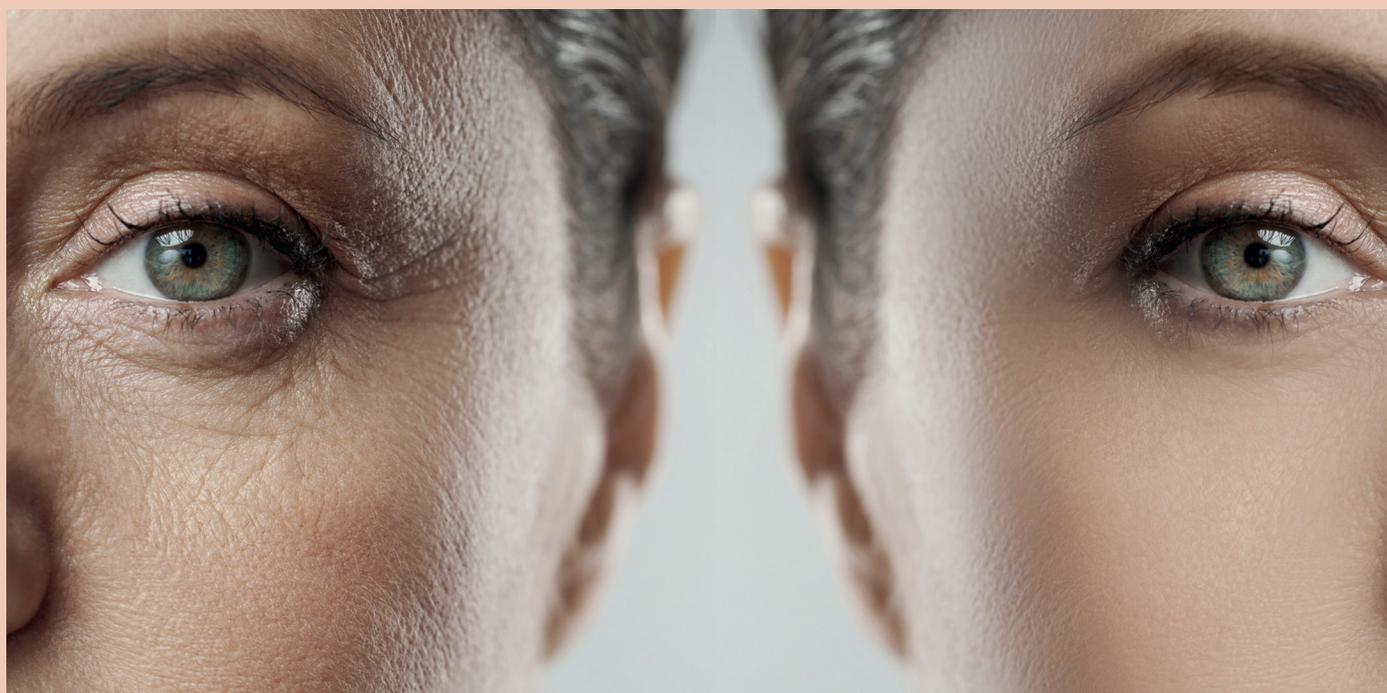

FILL & CARE® by TOSKANIMED®

I Filler **Skin Architect** sono realizzati con Acido ialuronico di elevata purezza che può essere applicato in qualsiasi area*.

Le proprietà viscoelastiche uniche, unite ad una densità variabile di Acido ialuronico, consentono una integrazione omogenea dei tessuti ed una ottimale distribuzione del materiale.

La gamma Skin Architect si integra naturalmente nella pelle per produrre i risultati desiderati con estrema naturalezza, fornendo compattezza e idratazione e restituendo immediatamente luminosità ed elasticità.

*ad eccezione della zona perioculare



Un peso molecolare molto alto

Acido ialuronico con un peso molecolare di 3.000 kDa, il più vicino a quello che si trova naturalmente nel derma.1 [1]




Durata

Una molecola più grande si degrada più lentamente a causa della sua maggiore dimensione e della minore superficie di contatto con la ialuronidasi. Grazie anche al processo di reticolazione dei filler, la degradazione avverrà con più tempo in modo uniforme e graduale



Una concentrazione per ogni esigenza

La gamma Skin Architect Fillers si compone di 3 prodotti con diverse concentrazioni per offrire una soluzione adatta ad ogni esigenza, ogni zona ed ogni paziente

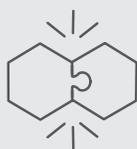


Elevata biocompatibilità


La composizione di Skin Architect Fillers è caratterizzata da Acido ialuronico ad altissimo peso molecolare, bassa concentrazione di BDDE e assenza di mannitolo



Massima sicurezza

Da sempre alla ricerca dell'eccellenza in tutti i nostri trattamenti, i filler Skin Architect sono una gamma di prodotti iniettabili con Marcatura CE prodotto dai laboratori TOSKANI certificati ISO 13485.

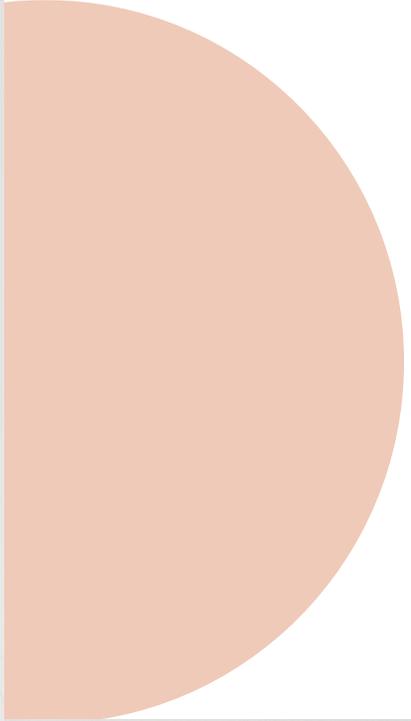

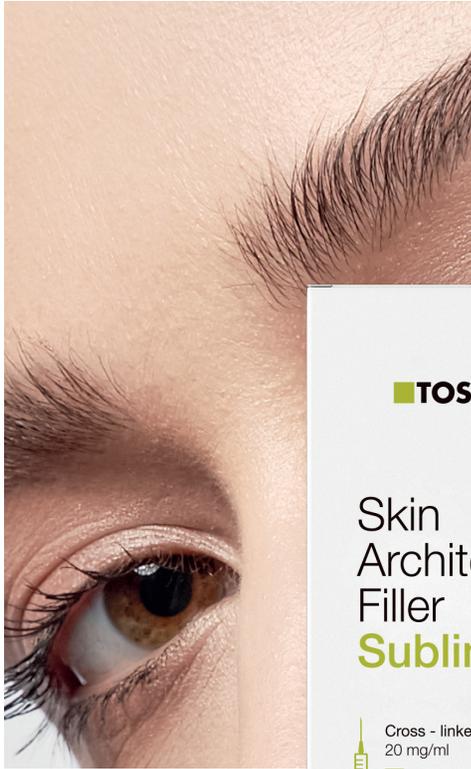

TOSKANI MED

Skin
Architect
Filler
Sublime

 Cross - linked sodium hyaluronate
20 mg/ml

 1 x 1.0 ml

CE
1023

SKIN Architect Filler Sublime 20

Adatto per il trattamento di rughe, linee di espressione e pieghe intorno alla bocca.

Applicazione:

Può essere applicato sia nello strato superficiale del derma che nello strato intermedio

Indicazioni:

- Rughe periorali, contorno labbra e miglioramento volumetrico
- Rughe sottili e poco profonde

Specifiche tecniche:



Concentrazione: 20 mg/ml



Siringa preriempita da 1 ml



2 x 27G 1/2"



Grado di reticolazione: 2.22%
Cross-linking agent: BDDE



Durata indicativa del trattamento 12 mesi



TOSKANIMED

Skin
Architect
Filler
Density



Cross - linked sodium hyaluronate
23 mg/ml
1 x 1.0 ml



CE
1023

SKIN Architect Filler Density 23

La funzione principale del Filler Density 23 è quella di correggere le rughe moderate e profonde. Ideale per il lip contouring.

Applicazione:

Si applica nello strato profondo del derma.

Indicazioni:

- Rughe medio profonde
- Pieghe naso labiali
- Angoli della bocca (Commissura)
- Rughe della Marionetta
- Rughe periorali molto pronunciate
- Effetto lifting naturale
- Contorno labbra compreso i tubercoli
- Rimodellamento contorni viso
- Ringiovanimento delle mani

Specifiche tecniche:



Concentrazione: 23 mg/ml



Siringa preriempita da 1 ml




2 x 27G 1/2"



Grado di reticolazione: 1.67%
Cross-linking agent: BDDE



Durata indicativa del trattamento 12 mesi

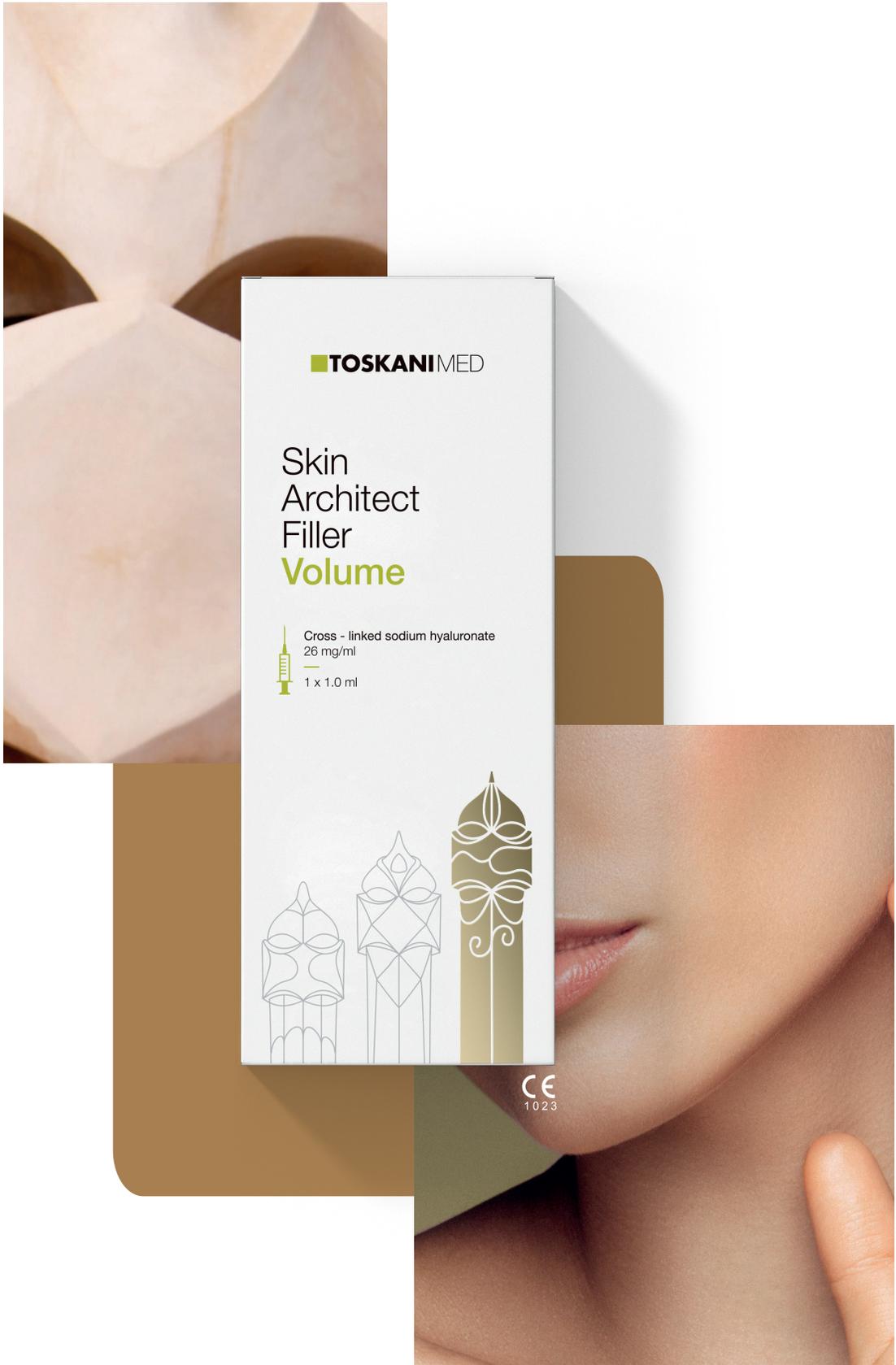

SKIN Architect Filler Volume 26

La sua funzione principale è il rimodellamento dei contorni del viso, l'aumento volumetrico delle labbra, degli zigomi, della mandibola, del mento, le correzioni del naso (rinomodellamento) e più in generale per il trattamento delle rughe di severa profondità.

Applicazione:

Si applica nello strato profondo o sottocutaneo del derma quando si cerca un aumento di volume. È preferibile invece l'introduzione nello strato medio del derma per l'area labiale.

Indicazioni:

- Rughe profonde
- Rimodellamento dell'ovale
- Effetto lifting intenso
- Zigomo, mandibola e mento
- Rughe naso labiali molto pronunciate
- Mascolinizzazione
- Rinofiller
- Contorno labbra compreso i tubercoli
- Volume labbra
- Ringiovanimento mani

Technical specifications:



Concentrazione: 26 mg/ml



Siringa preriempita da 1 ml



2 x 27G 1/2"



grado di reticolazione: 1.71%
Cross-linking agent: BDDE



Durata indicativa del trattamento 12 mesi

Results

ZONA PERIORALE

Età: 53

TOSKANI Clinical Case n°I.S_114 performed by Dr. Sergei Ostapchuk



Prima



15 giorni dopo la prima seduta

Paziente a cui sono state iniettate 3 siringhe: 2 Skin Architect Density per la piega nasolabiale e gli angoli delle labbra e 1 Skin Architect Sublime per la profilatura del labbro superiore.

Età: 38

TOSKANI Clinical Case n° NDA_26 performed by Dr. Enrique Lorente



Prima



3 mesi dopo la prima seduta

Paziente su cui sono state iniettate 2 siringhe di Skin Architect Volume e 1 di Skin Architect Density per la piega nasolabiale e per la profilatura del labbro inferiore.

MANI

Età: 73

TOSKANI Clinical Case n° G.T_72 performed by Dr. Mario Goisis



Prima



Subito dopo la prima seduta

Paziente a cui sono state iniettate 4 siringhe di Skin Architect Density. Applicazione con cannula.

MASCOLINIZZAZIONE & RINOMODELLAMENTO

Età: 33

TOSKANI Clinical Case n° B.J_267 performed by Dr. Mario Goisis



Prima



Dopo la prima seduta



Prima



Dopo la prima seduta

- Paziente a cui sono state iniettate 4 siringhe
- 1 siringa di Skin Architect Density per il rinomodellamento
- 7 siringhe in totale per la Mascolinizzazione: 4 siringhe di Skin Architect Volume e 1 siringa di Skin Architect Density per l'arco mandibolare. 2 siringhe per la zona del mento.

CURA DERMOCOSMETICA POST TRATTAMENTO

Terapia domiciliare topica per massimizzare e prolungare i risultati dei trattamenti intradermici



AFTER Cream

Crema ad azione locale con Cannabidiolo (CBD), Vitamina K e Arnica Montana che aiuta a ridurre i lividi e gli arrossamenti post intervento medico estetico



+ Arnica + Vit K

50 ml / 1.69 fl oz.

SKIN Architect Mesoserum

Siero con ingredienti altamente concentrati per ridurre gli effetti visibili dell'invecchiamento e fornire un potente effetto nutritivo

Ingredienti attivi:

DMAE, L-carnitine, Hyaluronic Acid, Natural Collagen, Elastin, Organic Silicon, Acetyl Hexapeptide-8 and Vitamin A.

30 ml / 1.01 fl oz.

SKIN Architect Cream

Crema idratante e nutriente anti invecchiamento che aiuta a migliorare e prolungare i risultati delle procedure medico estetiche

Ingredienti attivi:

DMAE, L-Carnitine, Hyaluronic Acid, Natural Collagen, Elastin, Organic Silicon, Acetyl Hexapeptide-8, Shea Butter and Vitamin A.

50 ml / 1.69 fl oz.






Tecniche di applicazione

BIOREINFORCEMENT PATTERNS



Tecnica a ponfi

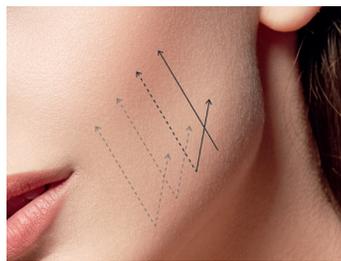

Tecnica lineare




Tecnica
Cross-hatching




Tecnica a ventaglio
(Fanning)




Tecnica a Zigzag

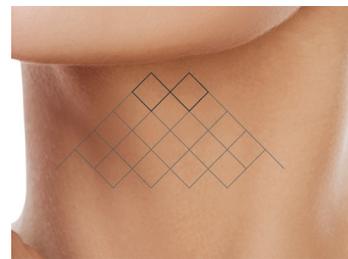

Correzione delle ptosi
nell'area del collo

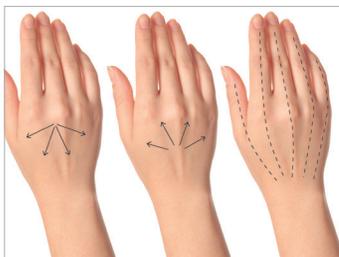

Correzioni mani

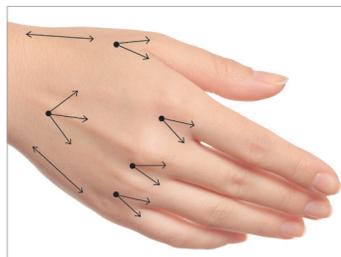

Tecnica di Filling
con cannula per le mani



Rinomodellamento

TOSKANIMED

PASSION FOR SKIN®



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA


ALQUIMIA
alquimiaestetica.it

Via Armando Vona (zona ASI) snc
località Le Lame - 03100 Frosinone
tel. 0775.290668



1 Keen MA. Hyaluronic Acid in Dermatology. Skinmed. 01/12/2017;15(6):441-448. PMID: 29282181.

TKN-67-3052-2110